






Um die unterschiedlichen Anforderungen bei der Reparatur von Leisten- und Schenkelhernien zu erfüllen, ist der BARD® PerFix™ Plug in folgenden Größen erhältlich:

Beschreibung	Größe (H x Ø) [cm]	Form	Verpackungseinheit [Stück]	Bestell-Nr.
PerFix™ Plug 	 2.5 x 3.4	Klein	2	0112750
	 3.3 x 3.9	Medium	2	0112760
	 4.1 x 4.8	Groß	2	0112770
	 4.1 x 5.0	Extra Groß	2	0112780

[1] Rutkow IM, Robbins AW: Mesh Plug Hernia Repair: A Follow-up Report. Surgery 1995;117:597-598

[2] Robbins AW, Rutkow IM: Mesh Plug Repair and Groin Surgery. Surg Clinics of N America. 1998;78;6:1007-1023

[3] Kingsnorth Andrew, et al. Lichtenstein Patch or Perfix Plug and Patch in Inguinal Hernia: A Prospective Double-Blind Randomized Controlled Trial of Short-Term Outcome. Surgery 2000;27;3:276-283



www.herniainfo.com

Für weitere Informationen zum BARD® PerFix™ Plug oder anderen Hernia Repair - Produkten, wenden Sie sich bitte an:

C. R. BARD GmbH

Wachhausstrasse 6 • D-76227 Karlsruhe
TEL: +49 721 9445-312 • FAX: +49 721 9445-100

BARD MEDICA S.A.

Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich
TEL: +41 1 722 53 60 • FAX: +41 1 722 53 70

BARD MEDICA S.A.

Thaliastrasse 125a/1/5 • A-1160 Wien
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.



© BARD ist ein eingetragenes Warenzeichen der C. R. BARD, Inc. oder eines ihrer Tochterunternehmen.
 TM PerFix ist ein Warenzeichen der C. R. BARD, Inc. oder eines ihrer Tochterunternehmen.
 SM "Bard, The Hernia Repair Company" ist ein Dienstleistungswarenzeichen der C. R. Bard, Inc. oder eines ihrer Tochterunternehmen.
 © Copyright 2004 C. R. BARD GmbH. All Rights Reserved.
 BR0001H (04/2004-5c)



Die innovative Lösung für die ambulante Versorgung von Leisten- und Schenkelhernien



Geben Sie der spannungsfreien Hernienreparation eine neue, dreidimensionale Form

BARD, THE HERNIA REPAIR COMPANYSM

PerFix™ Plug Mesh



Der Bard® PerFix™ Plug ist für die spannungsfreie präperitoneale Reparatoren von primären und rezidivierenden Leistenhernien sowie Schenkelhernien bestimmt.

Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung und bisher über 2 Millionen Implantanten weltweit ist die Hernienreparationstechnik mit dem PerFix™ Plug nachweislich:

Schnell

- Die gesamte Operation ist zeitsparend und dauert durchschnittlich ca. 25 Minuten.¹
- Für den Eingriff ist nur wenig Dissektion erforderlich.

Einfach

- 4-6 cm großer Hauteinschnitt.²
- Der Eingriff kann unter Lokal- oder Epiduralanästhesie durchgeführt werden.
- Für die Reparatoren aller Leistenhernien geeignet

Wirksam


- Anwendung einer spannungsfreien Reparatorenstechnik
- Niedrige Rezidivraten.^{1,2}
- Im Vergleich zu konventionellen Methoden der Hernienreparation haben die Patienten weniger Schmerzen und erholen sich schneller.^{1,3}

Der BARD® PerFix™ Plug besteht aus einem gewellten Schirm und inneren "Blütenblättern", um sich problemlos an Defekte unterschiedlicher Größen und Formen anzupassen. Die inneren "Blütenblätter" sorgen für Volumen und Stabilität, damit der Plug nicht kollabiert. Zur Gewährleistung einer individuellen Anpassung an jeden einzelnen Patienten können diese aber auch entfernt werden.


Der BARD® PerFix™ Plug ist aus BARD® Mesh - monofilem Polypropylen, das seine Langzeitverträglichkeit in mehr als 40 Jahren bewiesen hat.

Modifizierte PerFix™ Plug Technik


Bei Anwendung der modifizierten PerFix™ Plug Technik spannt sich der gewellte Schirm im präperitonealen Raum auf und fungiert als posteriores Underlay-Patch. Die Fixierung erfolgt an den inneren "Blütenblättern".

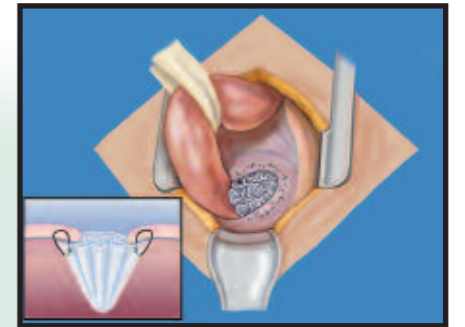

Reparation eines indirekten Leistenbruchs

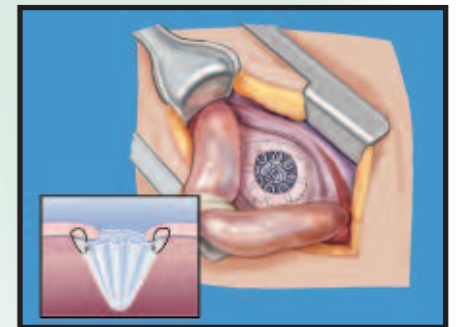

Reparation eines direkten Leistenbruchs

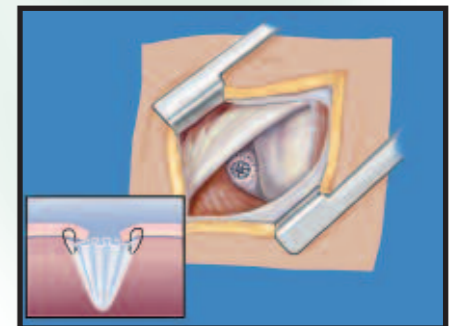

Reparation einer Schenkelhernie

